




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRY

ČESKY (CZ)

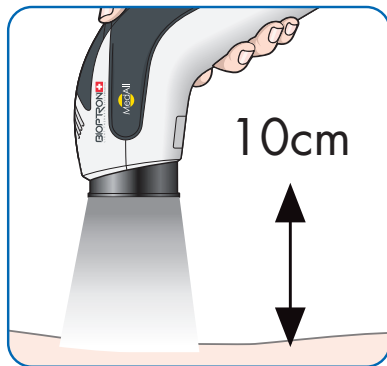

1



2



3



4

## JAK VÝROBEK POUŽÍVAT?

Přístroj BIOPTRON s požadovaným filtrem umístěte ve vzdálenosti 10 cm tak, aby pokryl oblast, kterou chcete ošetřit (obrázek 1). Při ošetřování oblastí větších, než je průměr barevného filtru, je ošetřujte jednu po druhé v délce doporučené doby.

## JAK VYMĚNIT FILTR?

Opatrně a bez násilí vyjměte filtr (obrázek 2), který chcete vyměnit, a vložte požadovaný barevný filtr, jak je znázorněno na obrázku 3. Držte spíše vnější kroužek filtru než objektív.

## JAK VYČISTIT FILTR? (obrázek 4)

1. Vyjměte filtr ze zařízení přidržením vnějšího kroužku filtru.
2. Použijte měkký, vlhký hadřík bez vlasu/vláken, aby nedošlo k poškrábání skleněného povrchu.
3. Vysušte filtr jiným hadříkem, který nepouští vlákna.

## ZÁRUKA

- 5 let, pokud je výrobek používán k určenému účelu a pokud jsou respektována varování.
- Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady.
- Tato záruka se nevztahuje na estetické změny způsobené běžným opotřebením, které neovlivňují výkon produktu, nebo na škody způsobené nesprávným používáním produktu.

## VAROVÁNÍ

1. K čištění vnitřní nebo vnější strany skleněného povrchu a filtračního kroužku nepoužívejte žádné chemikálie (např. isopropylalkohol).
2. Uchovávejte filtr v ochranném sáčku, aby se zabránilo hromadění prachu a změně barvy v důsledku vystavení slunečnímu záření.
3. Filtr je vyroben z křehkého skla, proto je nutné s ním zacházet opatrně!
4. Uživatelé není dovoleno odstranit čočku filtru.



PMD-ME145-22-CZ  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

Č E S K Y ( C Z )