




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

過濾

简体中文

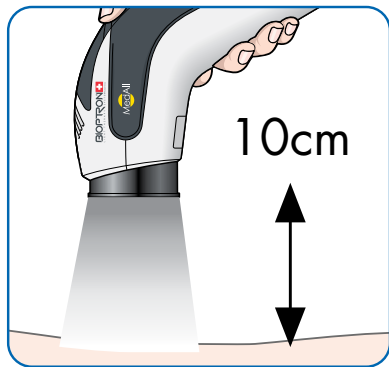

1



2



3



4

如何使用

距离 10 厘米放置装有所需滤镜的 BIOPTRON 设备，以覆盖希望治疗的区域（图 1）。当治疗区域大于彩色滤镜的直径时，请按照建议的时间逐一治疗。

如何更换滤镜

小心地轻轻取出要更换的滤镜（图 2），然后插入所需的彩色滤镜，如图 3 所示。

握住滤镜的外圈而不是镜片。

如何清洁滤镜（图 4）

1. 握住滤镜的外圈，从设备中取出滤镜。
2. 使用柔软、润湿的无绒布，以免刮伤玻璃表面。
3. 用另一块无绒布擦干滤镜。

保修

- 如果按规定使用并遵守警告事项，保修 5 年
- 本保修涵盖材料和制造缺陷
- 本保修不包括由不影响产品性能的正常磨损引起的外观变化，或因产品误用造成的损坏。

警告

1. 请勿使用任何化学品（例如异丙醇）清洁玻璃表面的内侧或外侧和滤镜圈。
2. 将滤镜存放在保护袋中，以防止积聚灰尘和因暴露在阳光下变色。
3. 滤镜由易碎玻璃制成，因此必须轻拿轻放！
4. 用户不得取下滤镜镜片。



PMD-ME145-22-EN
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

简体中文